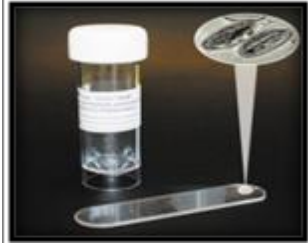


Инструкция по сбору биоматериала на исследование «Энтеробиоз (яйца остриц)»

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходим соскоб с поверхности периаанальных складок. Пробирку с ватным тампоном с глицерином (рис. 1) или транспортный контейнер с пластиковым шпателем (рис. 2) для взятия необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО.   Рис. 1 Рис. 2
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Взятие материала должно производиться утром до дефекации и проведения гигиенической обработки половых органов.
Информация «куда собирать».	Материал собирают на тампон, смоченный в глицерине, или полистироловый шпатель, который затем помещают в транспортный контейнер.
Информация «как собирать».	Пробирка с ватным тампоном с глицерином 1. Утром, в положении лежа на боку, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. 2. Тампоном, смоченным в глицерине, сделать соскоб с поверхности периаанальных складок. 3. Тампон поместить в пластиковую пробирку и плотно закрыть крышкой. Пластиковый шпатель + Транспортный контейнер 1. Утром, в положении лежа на боку, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. 2. Приложить шпатель стороной с нанесенным клеем к периаанальным складкам, прижать. 3. Шпатель поместить в контейнер для транспортировки и плотно закрыть крышкой.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Нельзя загрязнять тампон и шпатель каловыми массами.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	Условия хранения До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. Условия транспортировки Доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8°C (например, в термосе с кубиком льда или пакете с холодоэлементами).